



动态葡萄糖评估报告

基本信息



姓名：
年龄：34
病史：2型糖尿病

性别：女
手机号：182****1491


设备信息

设备型号：硅基动感Pro
设备名称：LT23112BXS

血糖数据

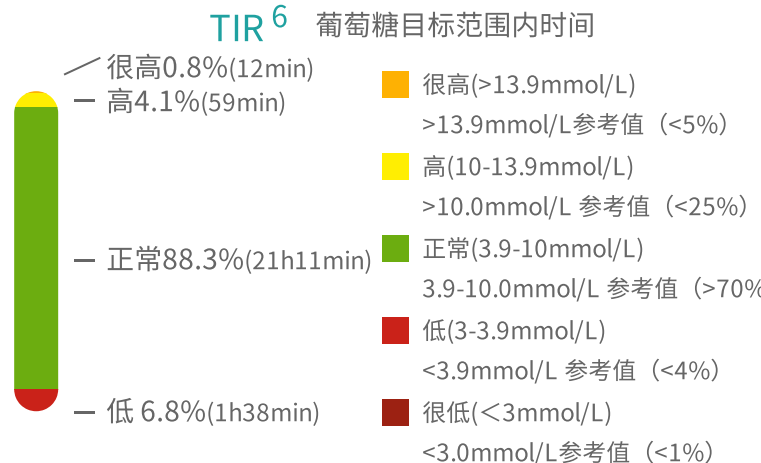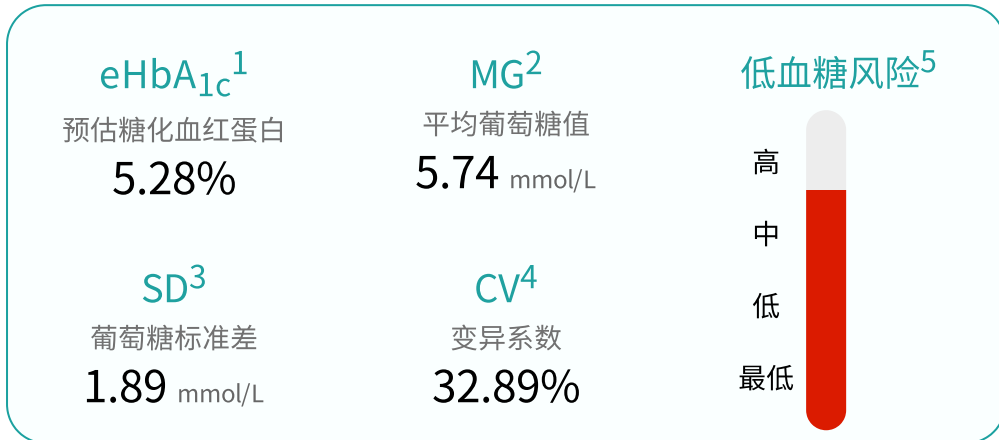

每日血糖

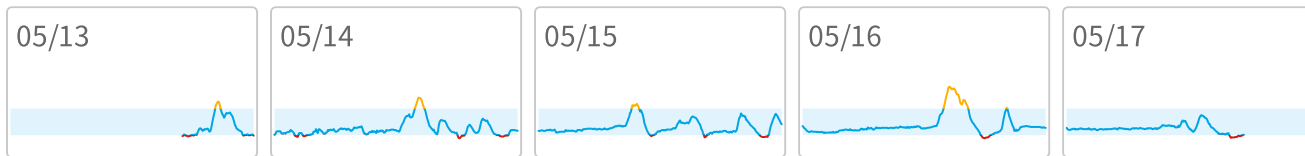


参数解释

- 预估糖化血红蛋白eHbA_{1c}：即根据CGM 葡萄糖读数估算HbA_{1c}，用于评价整体血糖水平。
- 平均葡萄糖值MG：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖标准差SD：CGM监测期间测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。
- 低血糖风险：是指使用低血糖指数LBGI预测低血糖风险。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。



每日葡萄糖曲线 (2024/05/13 - 2024/05/17) 5 天

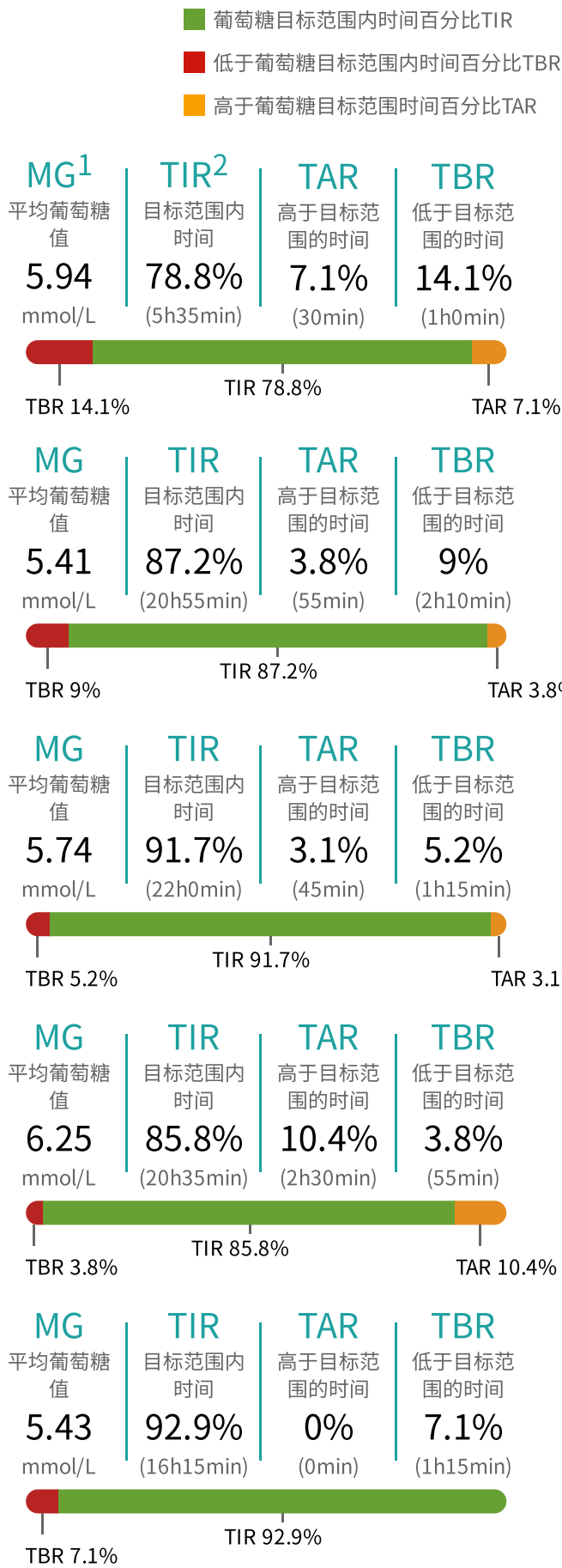


参数解释

- 平均葡萄糖值MG：当日所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。



多日对比曲线 (2024/05/13 - 2024/05/17) 5 天

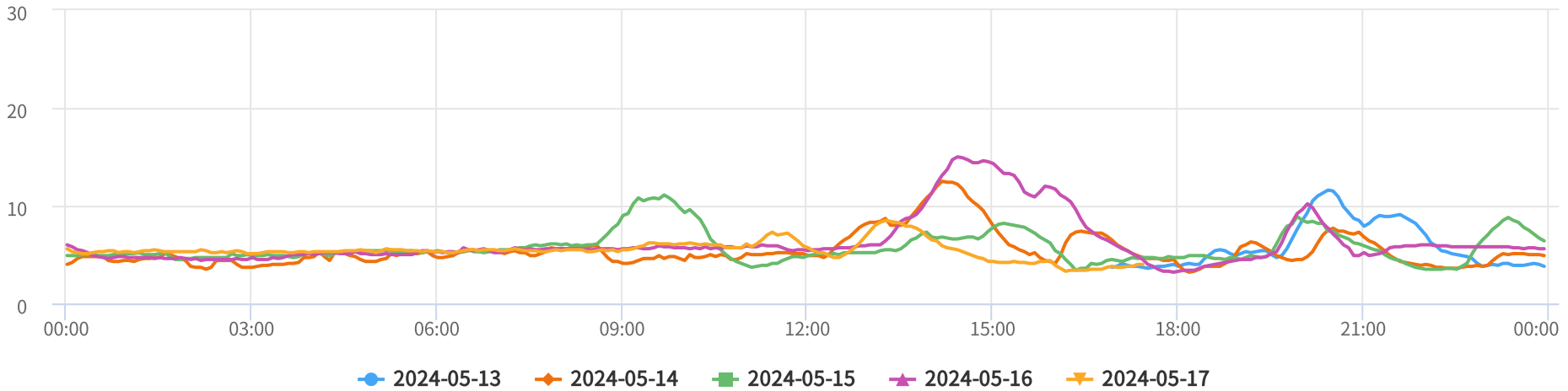

日期		05/13	05/14	05/15	05/16	05/17
探头值数量		85	288	288	288	210
上限	mmol/L	11.6	12.5	11.1	15	8.5
下限	mmol/L	3.6	3.2	3.4	3.2	3.3
平均值	mmol/L	5.94	5.41	5.74	6.25	5.43
达标时间百分比						
TIR	目标范围内时间	78.8%	87.2%	91.7%	85.8%	92.9%
TAR	高于目标范围时间	7.1%	3.8%	3.1%	10.4%	0%
TBR	低于目标范围时间	14.1%	9%	5.2%	3.8%	7.1%
血糖波动						
LAGE ¹	mmol/L 最大血糖波动振幅	8	9.3	7.7	11.8	5.2
MAGE ²	mmol/L 平均血糖波动幅度	--*	4.1	5.5	8.8	--*
MODD ³	mmol/L 日间血糖平均绝对差	--*	--*	1.47	1.58	--*
SD ⁴	mmol/L 葡萄糖标准差	2.35	1.72	1.58	2.49	0.96
CV ⁵		39.49%	31.9%	27.49%	39.85%	17.61%

*说明：首末日数据不足24h，无法进行计算。

参数解释

- 最大血糖波动幅度LAGE：评价最大血糖波动幅度，即当日葡萄糖测定值最大和最小血糖值之差。
- 平均血糖波动幅度MAGE：评价日内血糖波动程度，去除所有幅度未超过一定阈值（1SD）的血糖波动后，根据第一个有效波动方向计算波动幅度而得到的平均值，反映血糖波动。
- 日间血糖平均绝对差MODD：评价日间血糖波动程度，体现每日之间血糖的重复性，连续完整48h内相对应测定值间相减所得差的绝对值的平均水平。对应日期下MODD反映的是当天与前一天葡萄糖值的波动程度。
- 葡萄糖标准差SD：当日所有葡萄糖测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：当日所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。