



动态葡萄糖评估报告

基本信息



姓名：
年龄：57
病史：2型糖尿病

性别：未知
手机号：186****1922


设备信息

设备型号：硅基动感Pro
设备名称：LT23129SJK

血糖数据

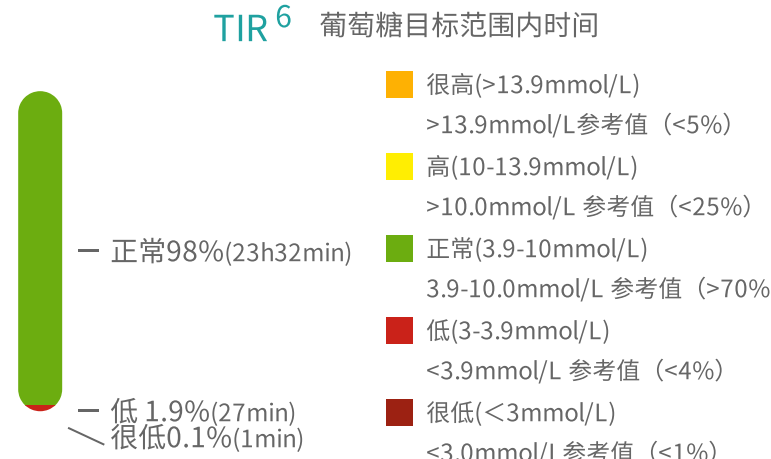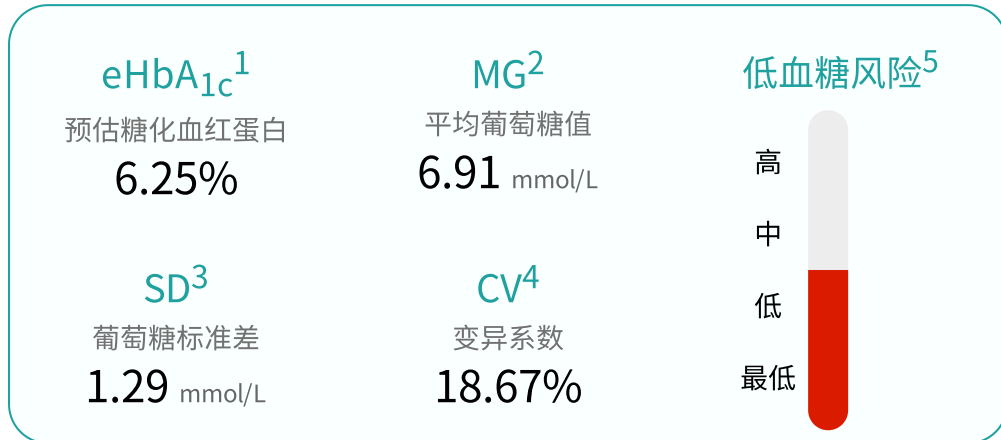

每日血糖

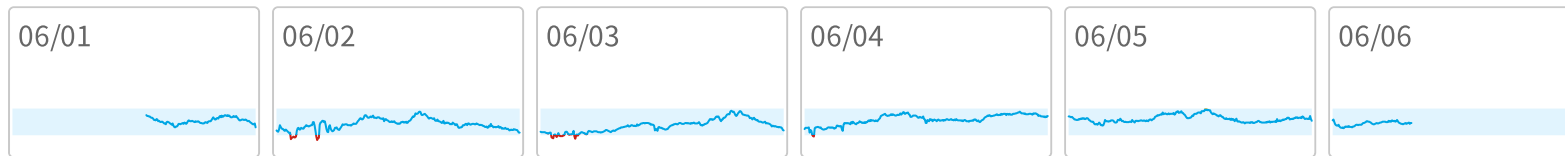

参数解释


- 预估糖化血红蛋白eHbA_{1c}：即根据CGM 葡萄糖读数估算HbA_{1c}，用于评价整体血糖水平。
- 平均葡萄糖值MG：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖标准差SD：CGM监测期间测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。
- 低血糖风险：是指使用低血糖指数LBGI预测低血糖风险。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。





每日葡萄糖曲线 (2024/06/01 - 2024/06/06) 6 天

■ 葡萄糖目标范围内时间百分比TIR
■ 低于葡萄糖目标范围内时间百分比TBR
■ 高于葡萄糖目标范围时间百分比TAR



06月01日

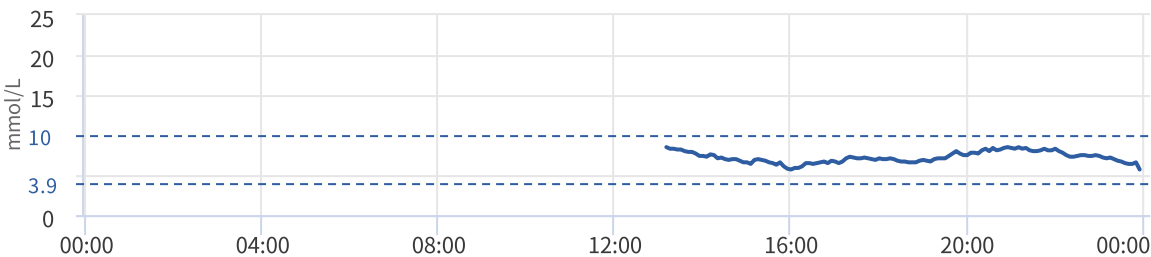



06月02日

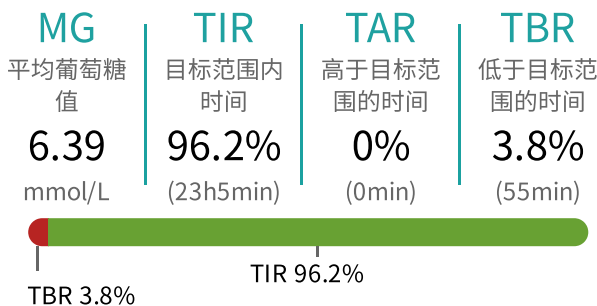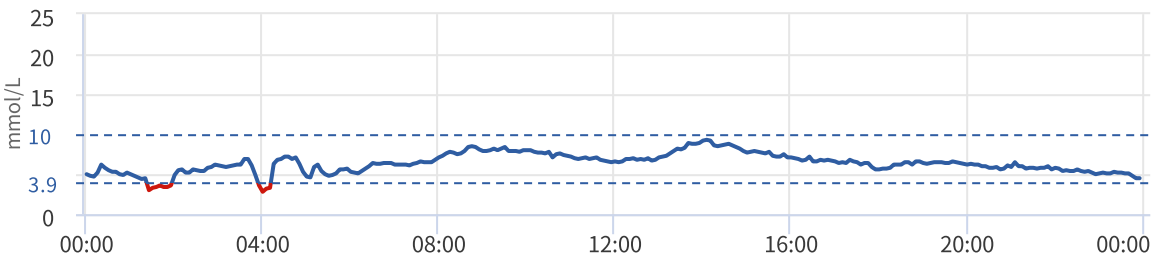



06月03日

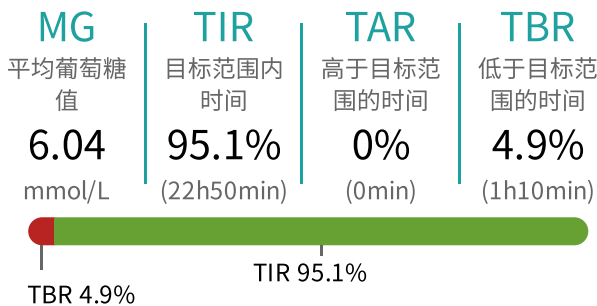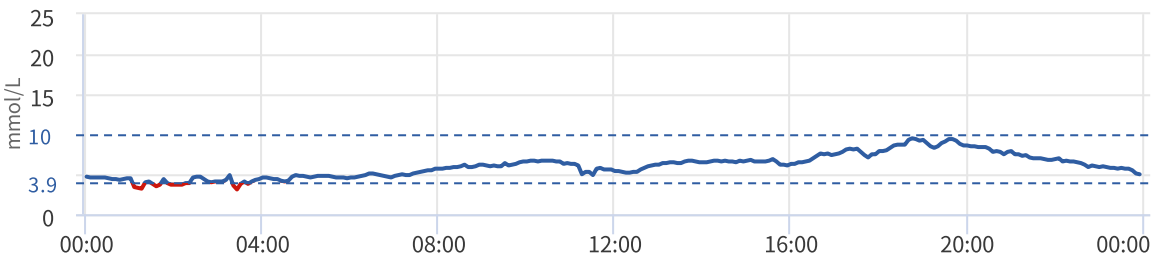



06月04日

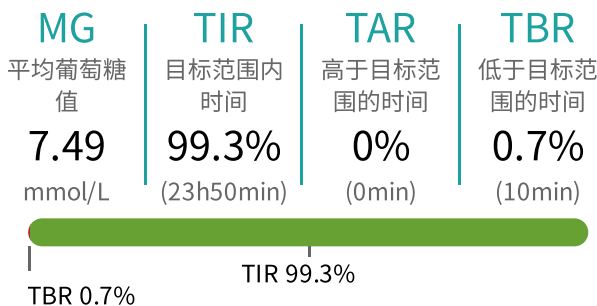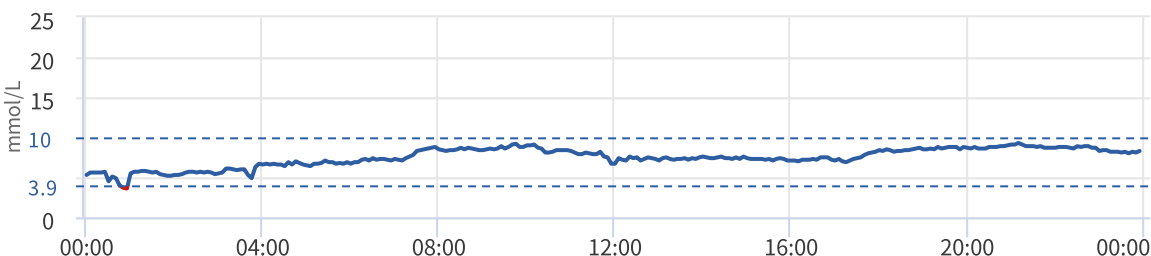

06月05日

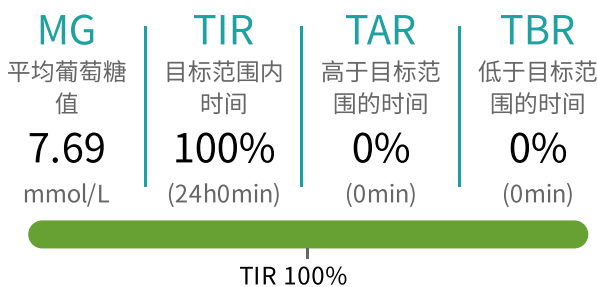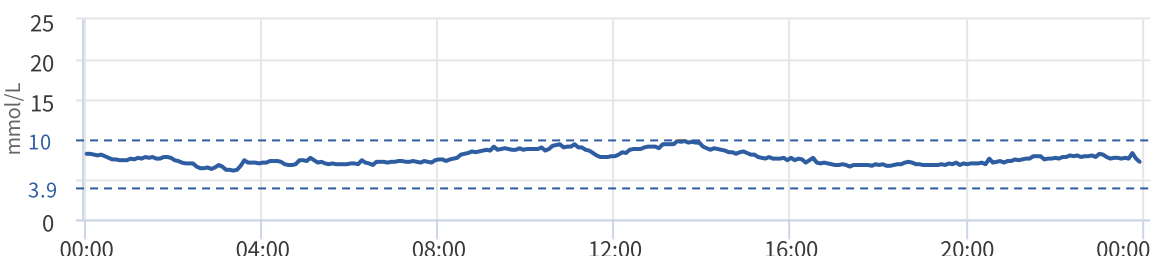

06月06日

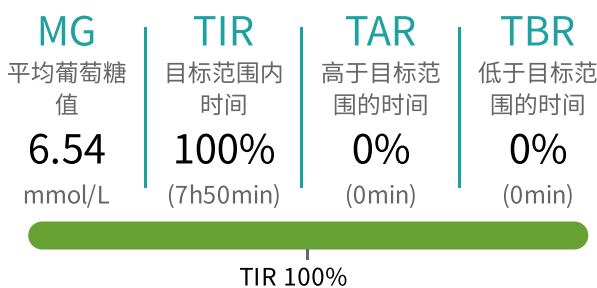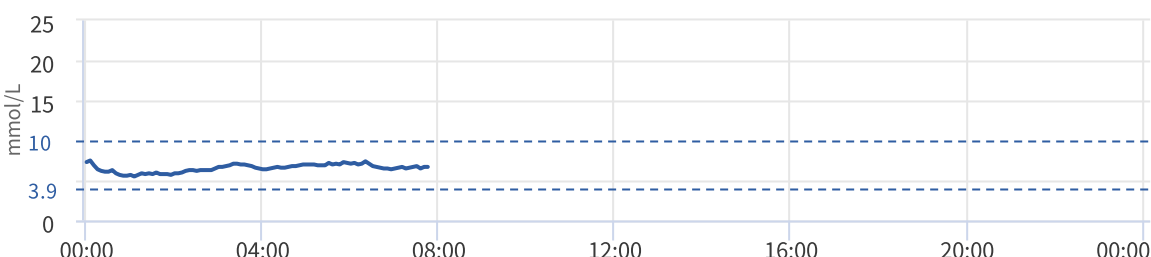


参数解释

- 平均葡萄糖值MG：当日所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。



|多日对比曲线 (2024/06/01 - 2024/06/06) 6 天

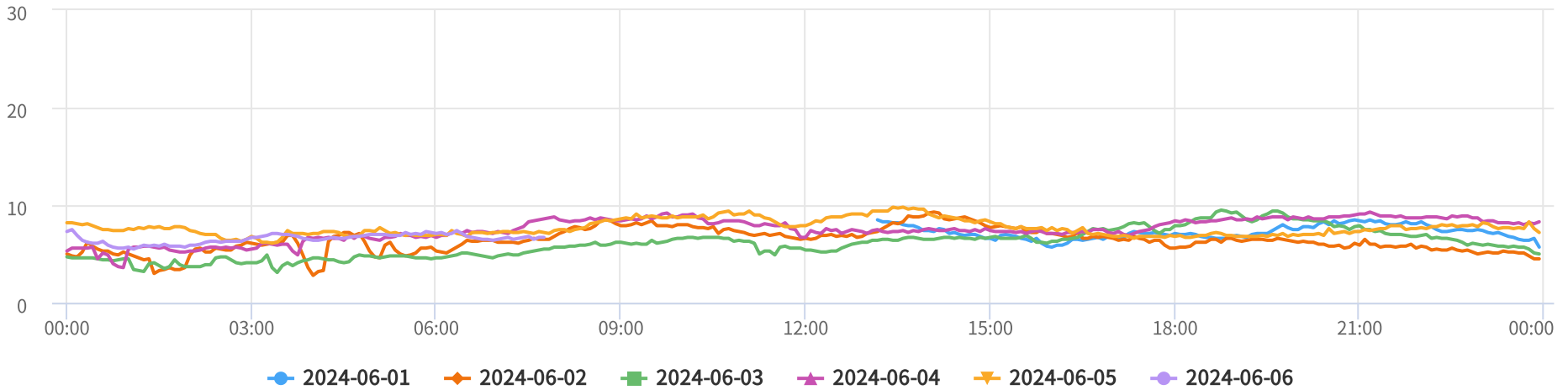

日期		06/01	06/02	06/03	06/04	06/05	06/06
探头值数量		130	288	288	288	288	94
上限	mmol/L	8.5	9.3	9.5	9.3	9.8	7.5
下限	mmol/L	5.7	2.8	3.1	3.6	6.1	5.5
平均值	mmol/L	7.24	6.39	6.04	7.49	7.69	6.54
达标时间百分比							
TIR	目标范围内时间	100%	96.2%	95.1%	99.3%	100%	100%
TAR	高于目标范围时间	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TBR	低于目标范围时间	0%	3.8%	4.9%	0.7%	0%	0%
血糖波动							
LAGE ¹	mmol/L 最大血糖波动振幅	2.8	6.5	6.4	5.7	3.7	2
MAGE ²	mmol/L 平均血糖波动幅度	--*	3	2.4	1.8	1.8	--*
MODD ³	mmol/L 日间血糖平均绝对差	--*	--*	1.4	1.57	1.03	--*
SD ⁴	mmol/L 葡萄糖标准差	0.69	1.22	1.45	1.16	0.82	0.48
CV ⁵		9.51%	19.15%	24.01%	15.52%	10.65%	7.39%

*说明：首末日数据不足24h，无法进行计算。

参数解释

- 最大血糖波动幅度LAGE：评价最大血糖波动幅度，即当日葡萄糖测定值最大和最小血糖值之差。
- 平均血糖波动幅度MAGE：评价日内血糖波动程度，去除所有幅度未超过一定阈值（1SD）的血糖波动后，根据第一个有效波动方向计算波动幅度而得到的平均值，反映血糖波动。
- 日间血糖平均绝对差MODD：评价日间血糖波动程度，体现每日之间血糖的重复性，连续完整48h内相对应测定值间相减所得差的绝对值的平均水平。对应日期下MODD反映的是当天与前一天葡萄糖值的波动程度。
- 葡萄糖标准差SD：当日所有葡萄糖测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：当日所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。